

Otto Bock®

QUALITY FOR LIFE



Bravoracer

Find
out!



BRAVO *racer*

Find
out!





Der Name verspricht viel – und er wird es halten!

Wer »er« ist? Ein Aktivrollstuhl für Kinder und Jugendliche, der mit seinem frischen Auftritt überall Aufmerksamkeit erregt. Ein Begleiter in knuffigem Design, der die Persönlichkeit der Kids durch seine vielseitig wählbaren Outfits widerspiegelt. Ein praktischer, kompakter Alleskönner, der sich durch jede Alltagssituation spielend leicht hindurchbewegt und sich problemlos zum Transport verstauen lässt. Ein anhand kindlicher Körper- und Wachstumsdaten entwickelter Aktivrollstuhl, der sich den Bedürfnissen der Kids anpasst und die Wünsche der Therapeuten unkompliziert umsetzt.

Ein dynamisch-verspielter Starrahmenrollstuhl, der ab sofort die große Bühne der Rollikids betritt – **BRAVO*racer***.

1
BRAVO!

BRAVO *racer*

Find
out!





2

BRAVOracer





2

BRAVO*racer*



Bremshebel

Der griffige Überzug sorgt für einfache und sichere Betätigung. Im Seitenteil versenkt, ist der Bremshebel mühelos zu erreichen und mit seinem kompakten Maß trotzdem nie im Weg



Vorderrahmen

Der formschön geschwungene Rahmen ist nicht nur chic, sondern bietet viel Platz für ein breites Fußbrett und eine effektive Abduktion der Beine.



Rückenwinkel

Um ein kleines Packmaß zu erreichen, lässt sich die Rückenlehne mit einem Handgriff entriegeln und auf die Sitzfläche klappen



Details




Kleiderschutz

Das formschön gestaltete Seitenteil gibt zusätzlich Halt, schützt die Kleidung vor Schmutz und taucht beim Klappen der Rückenlehne von selbst nach unten ab.



RightRun

Die hochwertige Rollstuhlbereifung von Schwalbe zeichnet sich durch extrem leichtes Laufverhalten aus. Auf Wunsch gibt es diese Hochdruck-Luftbereifung auch farbig!

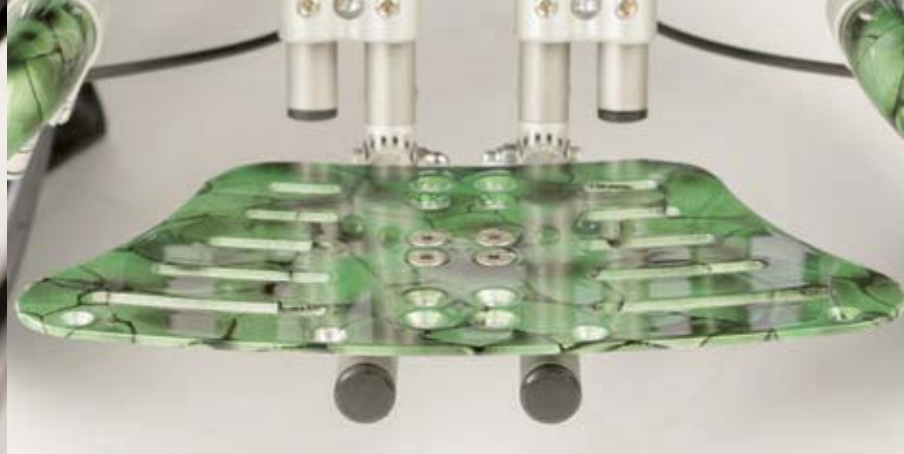

Fußbrett

Stabil, großflächig und mühelos einstellbar ermöglicht es eine sichere Positionierung der Füße. Es lässt sich für die Kleinsten auch als Einstiegsstufe nutzen!

2

BRAVO*racer*





2

BRAVO*racer*



Kippschutz

Mit einem Handgriff lässt sich der Kippschutz ein- und ausschwenken. Er bietet zusätzliche Sicherheit für den ungeübten Fahrer und versteckt sich in passiver Stellung im Radius der Antriebsräder.




Speichenschutz

Nützlich und attraktiv: Der Speichenschutz verhindert wirkungsvoll, dass man mit den Fingern in die Speichen gerät, und ist gleichzeitig ein Blickfang. Hier im „Gecko“-Spezialdesign.




Schiebestange

Als Alternative zur Angebotspalette der Schiebegriffe erleichtert die Schiebestange das Handling insbesondere kleiner Rollstühle. Wird sie nicht benötigt, ist sie mit wenigen Handgriffen abgenommen.

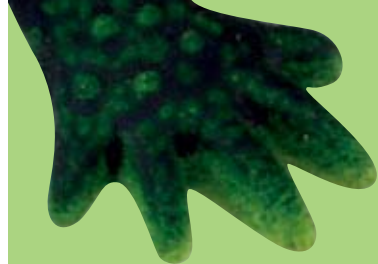

Optionen

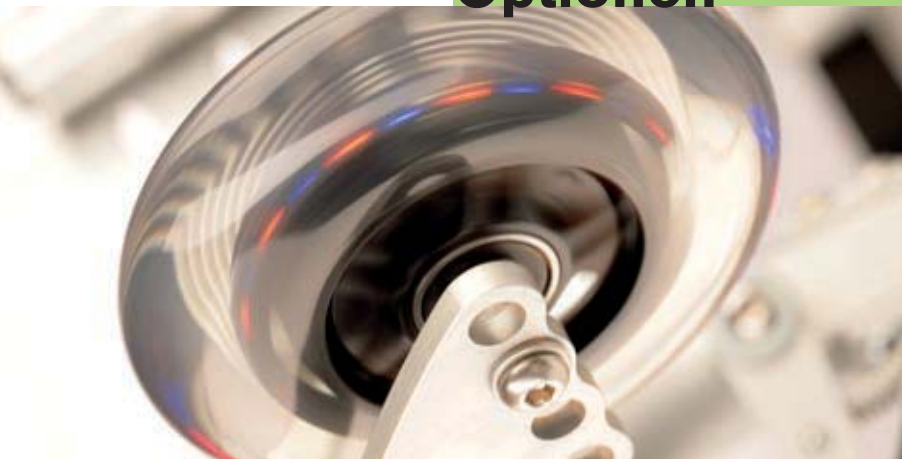

Leuchtrollen

Diese leichtlaufenden Lenkrollen ziehen mit ihren selbstaufladenden Leuchtdioden schnell Aufmerksamkeit auf sich. Ob als optischer Gimmick oder als Extra in Sachen passive Sicherheit, die Leuchtrollen sind immer eine gute Wahl.



Design-Kleiderschutz


Ein zusätzliches Plus an Farbvarianten bietet diese Variante des Seitenteils, die aus durchsichtigem Material hergestellt ist und auf die Rahmenfarbe des Rollstuhls abgestimmt geliefert wird.

2


BRAVO*racer*






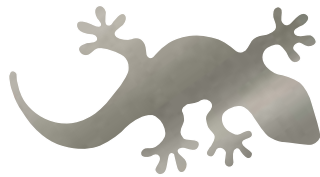


Brilliant Silber

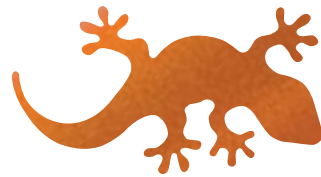


Sparkle Hellorange

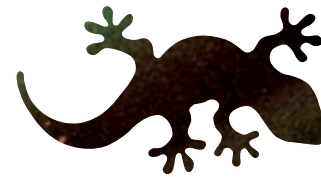


Snake Clear Red

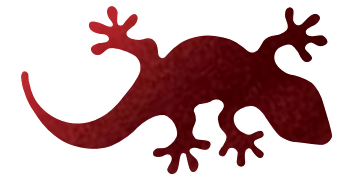


Candy Red

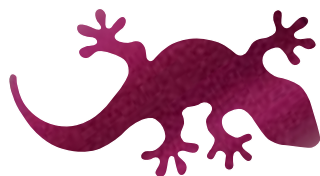

Dormant Vinho Sparkle

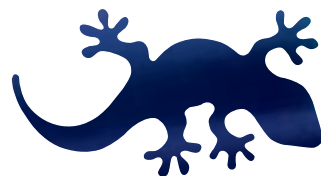

Dormant Marine Blue

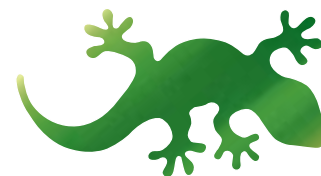

Dormant Apple Green



Clear Reptile Glossy



Rahmenfarben



Spooky Yellow

Spooky Blue








3

Technische Daten



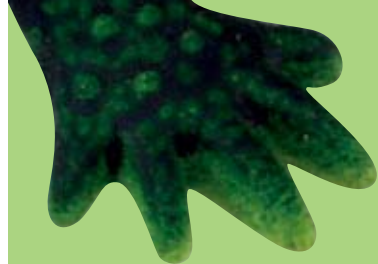

Technische Daten

Sitzbreite	20 cm – 36 cm
Sitztiefe	24 cm – 38 cm
Rückenhöhe	20 cm – 40 cm
Rückenwinkel	-15° – +15° einstellbar, zusätzlich in Position +15° einrastbar
Unterschenklänge	14,5 – 44,5
Sitzhöhen	31,5 – 46 (bei 20° Antriebsrad); 34 – 48,5 (bei 22° Antriebsrad); 36 – 51 (bei 24° Antriebsrad)
Gesamtbreite	47 – 63; 48 – 66 (bei 9° Sturz)
Gesamtlänge	61,5 – 76,5 (bei 20° Antriebsrad); 64 – 79 (bei 22° Antriebsrad); 66,5 – 81,5 (bei 24° Antriebsrad)
Gesamthöhe (ohne Schiebegriffe)	51,5 – 86 (bei 20° Antriebsrad); 54 – 88,5 (bei 22° Antriebsrad); 56,5 – 91 (bei 24° Antriebsrad)
Gewicht	ca. 8,5 kg
Zuladung	60 kg

3

Technische Daten

BRAVO*rac***er**



Otto Bock[®]

QUALITY FOR LIFE

Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH

Max-Näder-Straße 15 · 37115 Duderstadt · Telefon 05527 848-3433 · Telefax 05527 848-1460

reha@ottobock.de · www.ottobock.de